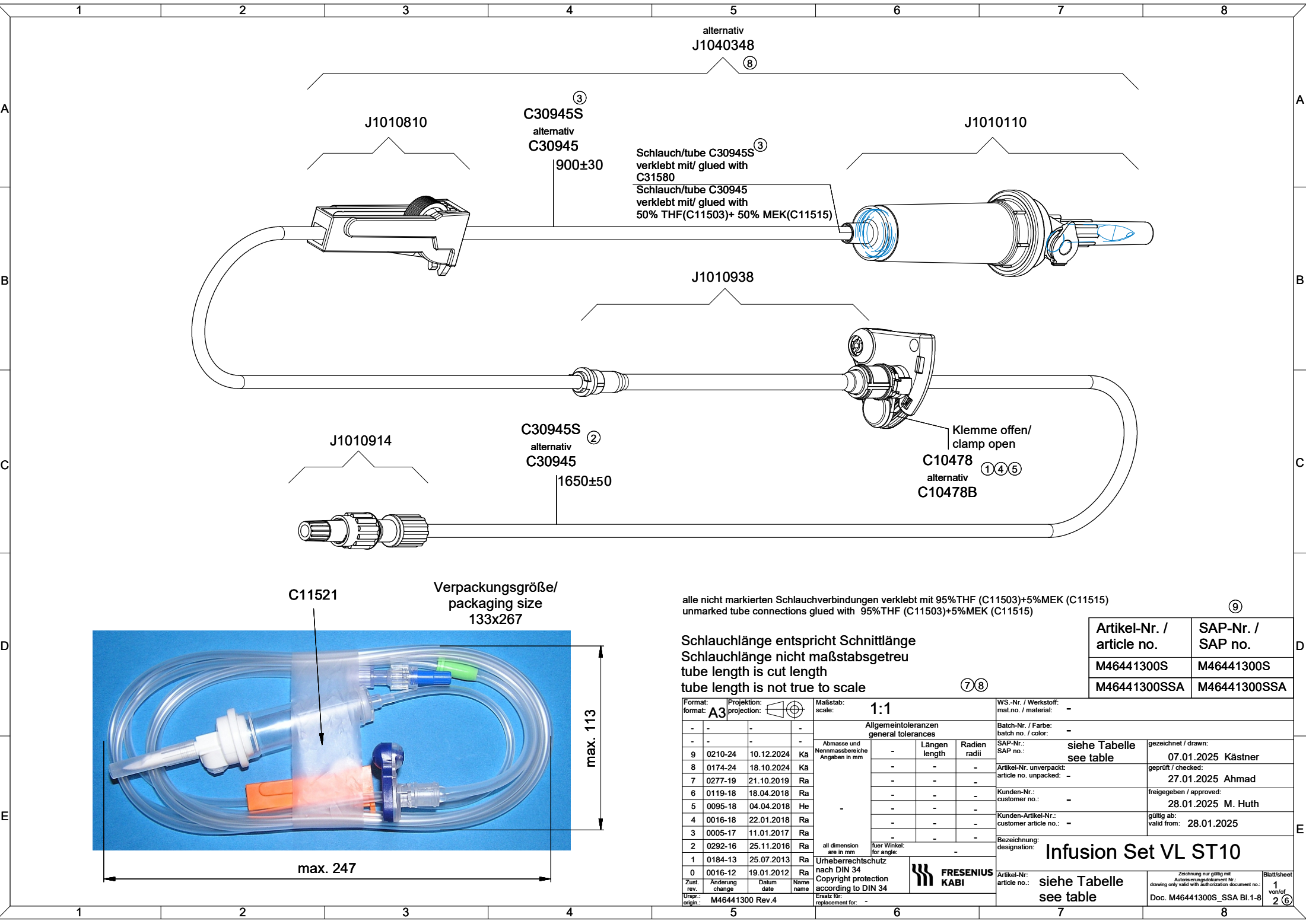




alternativ
J1040348

⑧

J1010810

C30945S
alternativ
C30945
900±30

Schlauch/tube C30945S
verklebt mit/ glued with
C31580
Schlauch/tube C30945
verklebt mit/ glued with
50% THF(C11503)+ 50% MEK(C11515)

J1010110

J1010938

J1010914

C30945S
alternativ
C30945
1650±50

Klemme offen/
clamp open

C10478
alternativ
C10478B
①④⑤

C11521

Verpackungsgröße/
packaging size
133x267

alle nicht markierten Schlauchverbindungen verklebt mit 95%THF (C11503)+5%MEK (C11515)
unmarked tube connections glued with 95%THF (C11503)+5%MEK (C11515)

⑨

Schlauchlänge entspricht Schnittlänge
Schlauchlänge nicht maßstabsgetreu
tube length is cut length
tube length is not true to scale

⑦⑧

Artikel-Nr. / article no.	SAP-Nr. / SAP no.
M46441300S	M46441300S
M46441300SSA	M46441300SSA

Format: format: A3	Projektion: projection:	Maßstab: scale: 1:1	WS.-Nr. / Werkstoff: mat.no. / material: -
- - - -		Allgemeintoleranzen general tolerances	
9	0210-24	10.12.2024	Kä
8	0174-24	18.10.2024	Kä
7	0277-19	21.10.2019	Ra
6	0119-18	18.04.2018	Ra
5	0095-18	04.04.2018	He
4	0016-18	22.01.2018	Ra
3	0005-17	11.01.2017	Ra
2	0292-16	25.11.2016	Ra
1	0184-13	25.07.2013	Ra
0	0016-12	19.01.2012	Ra
Zust. rev. Änderung change Datum date Name name		all dimension are in mm	
Urspr. origin: M46441300 Rev.4		Urheberrechtsschutz nach DIN 34 Copyright protection according to DIN 34	
		Ersatz für: replacement for: -	
		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	
		Längen length Radien radii	
		SAP-Nr.: siehe Tabelle	
		gezeichnet / drawn: 07.01.2025 Kästner	
		geprüft / checked: 27.01.2025 Ahmad	
		freigegeben / approved: 28.01.2025 M. Huth	
		gültig ab: valid from: 28.01.2025	
		Bezeichnung: designation: Infusion Set VL ST10	
		Artikel-Nr.: siehe Tabelle	
		Zeichnung nur gültig mit Autorisierungsdokument Nr.: drawing only valid with authorization document no.: Doc. M46441300S_SSA Bl.1-8	
		Blatt/sheet 1 von/of 2 ⑥	

Dokumentnummer/Document number: Doc. M46441300S_SSA Bl.1-8	Bezeichnung/Title: Infusion Set VL ST10
Artikelnummer/Article number: M46441300S_SSA Bl.1	Revision/Revision: 9

Freigegeben für / Approved for:

☐ Abmusterung/Verification	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☒ Nullserie/Pilot production	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	07.01.2025	T. Ahmad	i.A. T. Ahmad
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	08.01.2025	M. Huth	i.A. / Huth
	Date	Name	Signature
☐ begrenzte Stückzahl limited edition:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ Sonstiges/Other:	Gültig ab/Valid from: release of specification		
Geprüft: Checked:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature

☒ Serie/Serial production:	Gültig ab/Valid from: date of distribution		
Geprüft: Checked:	27.01.2025	T. Ahmad	i.A. T. Ahmad
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	28.01.2025	M. Huth	i.A. / Huth
	Date	Name	Signature