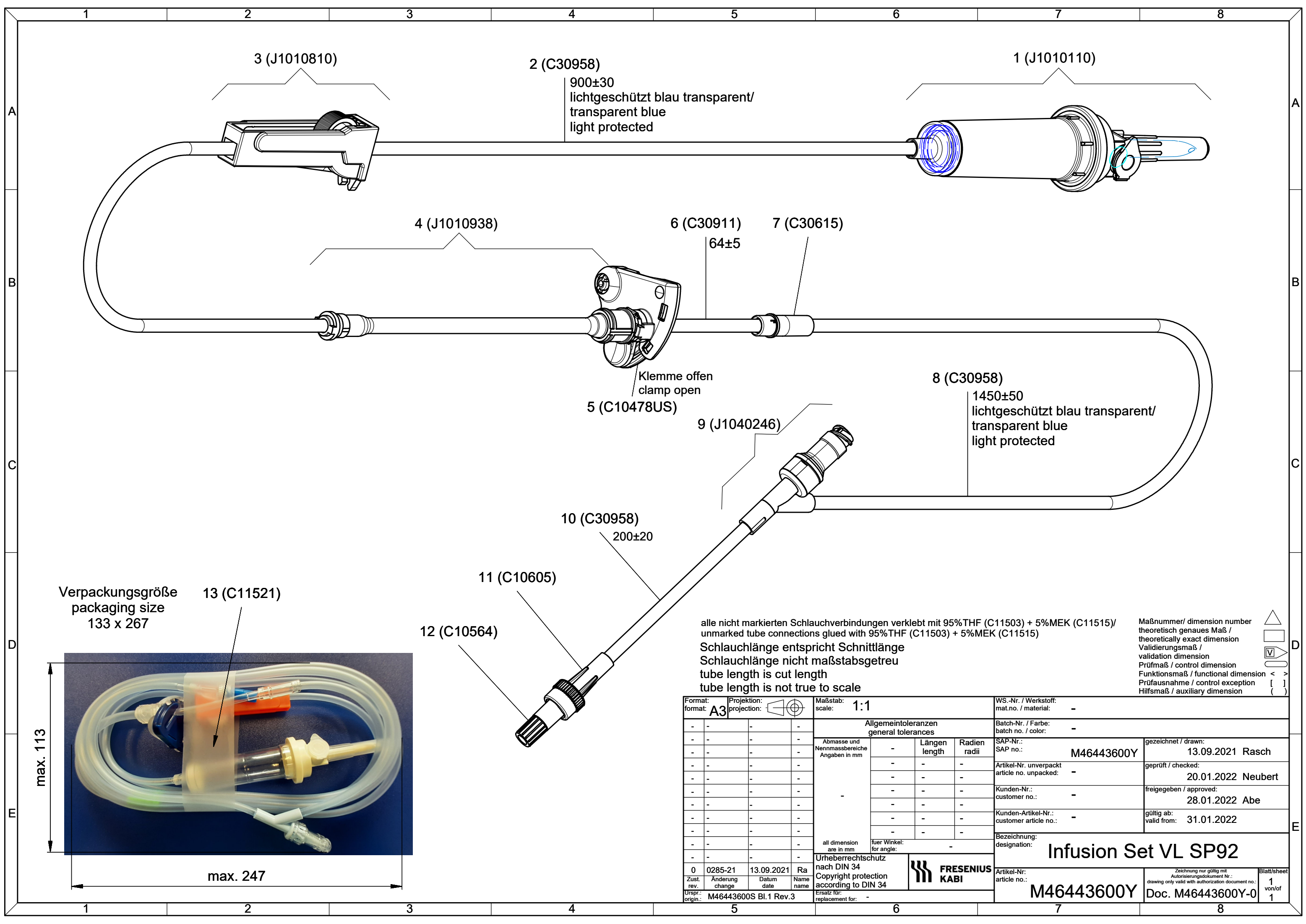




3 (J1010810)

2 (C30958)

900±30  
lichtgeschützt blau transparent/  
transparent blue  
light protected

1 (J1010110)

4 (J1010938)

6 (C30911)

64±5

7 (C30615)

Klemme offen  
clamp open

5 (C10478US)

9 (J1040246)

8 (C30958)

1450±50  
lichtgeschützt blau transparent/  
transparent blue  
light protected

10 (C30958)

200±20

11 (C10605)

12 (C10564)

alle nicht markierten Schlauchverbindungen verklebt mit 95%THF (C11503) + 5%MEK (C11515)/  
unmarked tube connections glued with 95%THF (C11503) + 5%MEK (C11515)  
Schlauchlänge entspricht Schnittlänge  
Schlauchlänge nicht maßstabsgetreu  
tube length is cut length  
tube length is not true to scale

Maßnummer/ dimension number  
theoretisch genaues Maß /  
theoretically exact dimension  
Validierungsmaß /  
validation dimension  
Prüfmaß / control dimension  
Funktionsmaß / functional dimension < >  
Prüfausnahme / control exception [ ]  
Hilfsmaß / auxiliary dimension ( )

|                                           |                                                                                   |                        |                                                   |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format:<br>format: A3                     | Projektion:<br>projection:                                                        | Maßstab:<br>scale: 1:1 | WS.-Nr. / Werkstoff:<br>mat.no. / material: -     |                                                                                                                                  |
| -                                         | -                                                                                 | -                      | Batch-Nr. / Farbe:<br>batch no. / color: -        |                                                                                                                                  |
| -                                         | -                                                                                 | -                      | SAP-Nr.:<br>SAP no.: M46443600Y                   | gezeichnet / drawn:<br>13.09.2021 Rasch                                                                                          |
| -                                         | -                                                                                 | -                      | Artikel-Nr. unverpackt<br>article no. unpacked: - | geprüft / checked:<br>20.01.2022 Neubert                                                                                         |
| -                                         | -                                                                                 | -                      | Kunden-Nr.:<br>customer no.: -                    | freigegeben / approved:<br>28.01.2022 Abe                                                                                        |
| -                                         | -                                                                                 | -                      | Kunden-Artikel-Nr.:<br>customer article no.: -    | gültig ab:<br>valid from: 31.01.2022                                                                                             |
| -                                         | -                                                                                 | -                      | Bezeichnung:<br>designation: Infusion Set VL SP92 |                                                                                                                                  |
| 0                                         | 0285-21                                                                           | 13.09.2021             | FRESENIUS<br>KABI                                 | Artikel-Nr.:<br>article no.: M46443600Y                                                                                          |
| Zust.<br>rev.                             | Änderung<br>change                                                                | Datum<br>date          |                                                   | Zeichnung nur gültig mit<br>Autorisierungsdokument Nr.:<br>drawing only valid with authorization document no.: Doc. M46443600Y-0 |
| Urspr.:<br>origin.: M46443600S Bl.1 Rev.3 | Urheberrechtsschutz<br>nach DIN 34<br>Copyright protection<br>according to DIN 34 |                        | Ersatz für:<br>replacement for: -                 | Blatt/sheet<br>1 von/of<br>1                                                                                                     |

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dokumentnummer/Document number:<br>Doc. M46443600Y-0 | Bezeichnung/Title:<br>Infusion Set VL SP92 |
| Artikelnummer/Article number:<br>M46443600Y          | Revision/Revision:<br>Rev.0                |

**Freigegeben für / Approved for:**

|                                                                  |                   |                                                   |                     |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Abmusterung/Verification                |                   | Gültig ab/Valid from: <b>date of distribution</b> |                     |  |
| Geprüft:<br>Checked:                                             | _____             | _____                                             | _____               |  |
|                                                                  | Date              | Name                                              | Signature           |  |
| Autorisiert:<br>Released:                                        | _____             | _____                                             | _____               |  |
|                                                                  | Date              | Name                                              | Signature           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nullserie/Pilot production   |                   | Gültig ab/Valid from: <b>date of distribution</b> |                     |  |
| Geprüft:<br>Checked:                                             | <u>23.09.2021</u> | <u>Nenbert</u>                                    | <u>i.A. M. Huth</u> |  |
|                                                                  | Date              | Name                                              | Signature           |  |
| Autorisiert:<br>Released:                                        | <u>23.09.2021</u> | <u>M. Huth</u>                                    | <u>i.A. F. Huth</u> |  |
|                                                                  | Date              | Name                                              | Signature           |  |
| <input type="checkbox"/> begrenzte Stückzahl<br>limited edition: |                   | Gültig ab/Valid from: <b>date of distribution</b> |                     |  |
| Geprüft:<br>Checked:                                             | _____             | _____                                             | _____               |  |
|                                                                  | Date              | Name                                              | Signature           |  |
| Autorisiert:<br>Released:                                        | _____             | _____                                             | _____               |  |
|                                                                  | Date              | Name                                              | Signature           |  |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges/Other:                        |                   | Gültig ab/Valid from: <b>date of distribution</b> |                     |  |
| Geprüft:<br>Checked:                                             | _____             | _____                                             | _____               |  |
|                                                                  | Date              | Name                                              | Signature           |  |
| Autorisiert:<br>Released:                                        | _____             | _____                                             | _____               |  |
|                                                                  | Date              | Name                                              | Signature           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serie/Serial production:     |                   | Gültig ab/Valid from: <b>date of distribution</b> |                     |  |
| Geprüft:<br>Checked:                                             | <u>20.01.2022</u> | <u>Nenbert</u>                                    | <u>i.A. M. Huth</u> |  |
|                                                                  | Date              | Name                                              | Signature           |  |
| Autorisiert:<br>Released:                                        | <u>28.01.2022</u> | <u>S. Abt</u>                                     | <u>Re</u> 4321      |  |
|                                                                  | Date              | Name                                              | Signature           |  |