

8 (C30945S) ⑦

alternativ
(C30945)

700±30

Schlauch/tube C30945S
verklebt mit/ glued with
C31580
Schlauch/tube C30945
verklebt mit/ glued with
95% THF(C11503)+ 5% MEK(C11515)
⑧

9 (J1010810)

10 (J1010938)

3 (C10463) 2 (C30936)

200±20

1(J1020091)

6 (C30936)
30±5

4 (C30710)

5 (C10607)

geklebt mit/glued with
DCM (C11519)

11 (C10478) ①③④⑤⑥
alternativ
(C10478B)
Klemme offen/
clamp open

12 (C30945S) ②⑤⑥
alternativ
(C30945)

1450±50

13 (C30727)

alle nicht markierten Schlauchverbindungen verklebt mit 95%THF(C11503)+5%MEK (C11515)
unmarked tube connections glued with 95%THF (C11503)+5%MEK (C11515)

Schlauchlänge entspricht Schnittlänge
tube length is cut length
tube length is not true to scale

14 (C30945S) ②
alternativ
(C30945)

200±20

15 (J1010914)

16 (C11521)

Verpackungsgröße
packaging size
100 x 500



Format: format: A3	Projektion: projection:	Maßstab: scale: 1:1	WS.-Nr. / Werkstoff: mat.no. / material: -
-	-	-	Batch-Nr. / Farbe: batch no. / color: -
9 0154-18	17.05.2018	He	SAP-Nr.: SAP no.: M46445200S
8 0144-18	14.05.2018	Ra	gezeichnet / drawn: 17.05.2018 Henkel
7 0104-18	09.04.2018	Ra	Artikel-Nr. unverpackt: article no. unpacked: -
6 0095-18	04.04.2018	He	geprüft / checked: 10.08.2018 Schott
5 0080-18	14.03.2018	Ra	Kunden-Nr.: customer no.: -
4 0053-18	13.02.2018	Ra	freigegeben / approved: 14.08.2018 Pütter
3 0159-17	18.08.2017	Ra	Kunden-Artikel-Nr.: customer article no.: -
2 0299-16	30.11.2016	Ra	gültig ab: valid from: 21.08.2018
1 0184-13	25.07.2013	Ra	Bezeichnung: designation: Infusion Set VL PA92
0 0435-11	04.11.2011	Ra	Artikel-Nr.: article no.: M46445200S
Zust. rev.	Änderung change	Datum date	Name name
Urspr. origin:	M46445200 Index 5	Ersatz für: replacement for:	Blatt/Sheet 1 von/of 2 ⑨

Abmase und
Nennmassbereiche
Angaben in mm

	Längen length	Radial radii
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-


all dimension
are in mm

für Winkel:
for angle: -

Urheberrechtsschutz
nach DIN 34
Copyright protection
according to DIN 34

FRESENIUS
KABI

Zeichnung nur gültig mit
Autorisierungsdokument Nr.:
drawing only valid with authorization document no.:
Doc. M46445200S Bl.1-8

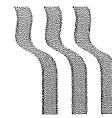

Dokumentnummer/Document number : Doc. M46445200S Bl.1-8	Bezeichnung/Title: Infusion Set VL PA92
Artikelnummer/Article number: M46445200S Bl.1	Revision/Revision: Rev.9

Freigegeben für / Approved for:

☐ Abmusterung/Verification		Gültig ab/Valid from:	
Geprüft: Checked:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ Nullserie/Pilot production		Gültig ab/Valid from:	
Geprüft: Checked:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ begrenzte Stückzahl limited edition:		Gültig ab/Valid from:	
Geprüft: Checked:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
☐ Sonstiges/Other:		Gültig ab/Valid from:	
Geprüft: Checked:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	_____	_____	_____
	Date	Name	Signature

☒ Serie/Serial production:		Gültig ab/Valid from: Date of distribution	
Geprüft: Checked:	10 AUG 2018	D. SCHOTT	
	Date	Name	Signature
Autorisiert: Released:	14.08.2018	H. P. Th	
	Date	Name	Signature